

PVX100

System Szczepień dla Drobiu



Every Shot
Counts™

Dostępne są dwie konfiguracje systemu:



PVX100

Konfiguracja pojedyncza

Dokładne  łanie jednej szczepionki.



PVX100

Konfiguracja podwójna 

Jednoczesne podawanie dwóch szczepionek za pomocą 1 lub 2 igieł.



Przegląd Systemu

Technologia, która Rewolucjonizuje Proces Szczepień

Pistolet

Lekki, ergonomiczny, optymalizuje zmęczenie operatora.

Audio-wizualne

ostrzeżenie o błędach w podaniu szczepionki.

Ergonomiczna kamizelka

W pełni regulowana, wykonana z wysokiej jakości materiału.

Jednostka kontrolna

Zapewnia dokładne podanie dawki i spójność procesu szczepienia.



Strona internetowa



Chmura Składowanie



Internet łączność dane przenoszenie



Aplikacja mobilna



Transmisja danych przez Bluetooth



Kompleksowe Rozwiązanie




Aplikacja Mobilna

- ✔ Łatwe programowanie wielu urządzeń z wcześniej zaplanowanymi programami szczepień.
- ✔ Bieżący nadzór nad procesem i kontrolą jakości szczepienia z możliwością natychmiastowego reagowania na pojawiające się problemy (w tym nietrafione iniekcje, wymiana igieł, niewłaściwa temperatura szczepionki i inne).
- ✔ Możliwość pracy w trybie offline w obszarach bez dostępu do internetu.

Strona Internetowa

- ✔ Przeglądaj dokumentację szczepień online, w dowolnym miejscu i czasie, z dostępem 24/7.
- ✔ Analizuj i porównuj raporty, podejmuj decyzje oparte na danych w celu ciągłego doskonalenia procesów.
- ✔ Zaawansowane interaktywne raporty Business Intelligence umożliwiające intuicyjną interpretację danych.



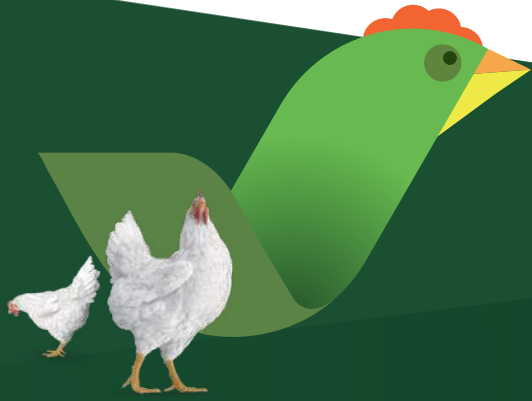

Specyfikacje Systemu

Smukła Głowica

9,5 mm igła

Do 6 mm
głębokości podania

Smukła, długa głowica

12,7 mm lub
15,9 mm igła

Do 9 mm
głębokości
podania

Same parameters as classic injection head with screw-on safety cover.

Smukła głowica XL

15,9 mm lub
19 mm igła

Do 15,5 mm
głębokości
podania

Ostionka Wkręcana

Ostionka Wciskana

Ostionka Smukła

Ostionka Stożkowa

Podwójna głowica (domięśniowo)

12,7 mm lub
15,9 mm igła

Do 9 mm
głębokości
podania

✓ Zalecane rozmiary igieł: 18G, 19G, 20G.

✓ Rekomendujemy podawanie szczepionek na adjuwancie wodnym lub olejowym w dawkach w przedziale 0,2 - 0,6 ml (wyższe lub niższe dawki są możliwe).



Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą stronę internetową
phitech.pahc.com/pl

Lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym
Lek. Wet. Robert Krzywda
Vaccination Service Engineer

tel: +48 667 740 536
e-mail: robert.krzywda@pahc.com

©2024 pHi-Tech Animal Health Technologies Ltd.

Every Shot Counts™ jest znakiem towarowym należącym do lub licencjonowane przez Phibro Animal Health Korporacja lub jej spółki stowarzyszone.